

IT



ageLOC® Galvanic Body Spa

Avvertenze importanti

Prima di iniziare, leggere attentamente le seguenti avvertenze:

1. Controllate sempre lo strumento prima dell'uso. Assicuratevi che le superfici non siano ruvide o danneggiate, che non vi siano bordi taglienti o bolle. Se notate delle anomalie, non usate lo strumento, ma contattate l'ufficio Nu Skin locale. Conservate lo strumento in un luogo asciutto a temperatura ambiente, a un minimo di 4°C, per evitare una possibile formazione di bolle di cromo.
2. ageLOC® Galvanic Body Spa II è adatto solo per l'uso su pelli non danneggiate. Non usarlo su pelle irritata o ferite aperte, se si è affetti da rosacea, in caso di allergie al metallo, di pelle problematica o estremamente sensibile. Consultare il proprio medico prima di usare lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa in caso di gravidanza, se siete portatori di pacemaker o altri dispositivi simili, se siete affetti da epilessia, se avete un impianto metallico o in caso di malattia.
3. NON usare lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa sul volto o altre aree sensibili. Lo strumento e i prodotti sono intesi unicamente per l'uso esterno su aree specifiche. In caso di rossore, gonfiore o irritazione anomala, interrompere subito l'uso; **in caso di necessità, richiedere l'assistenza di un medico.** Se la condizione persiste, consultare un medico. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
4. I nuovi utenti di ageLOC® Galvanic Body Spa e coloro che hanno una cute sensibile o soggetta ad allergie devono sempre effettuare un test localizzato sulla pelle, per esempio dietro l'orecchio o all'interno del braccio, prima di usare il prodotto secondo le istruzioni.
5. Usare il dispositivo solo come descritto nel manuale dell'utente. NON usare tempi di applicazione superiori a quelli raccomandati o frequenze diverse da quelle indicate in questa guida.
6. Togliere tutte le pellicole protettive prima di iniziare.
7. Lo strumento contiene pile. Per ridurre il rischio di scossa, ustione, incendio o lesione: non immergere il dispositivo nell'acqua. Non mettere o conservare il dispositivo in un luogo dove può cadere o essere tirato in una vasca, in un lavandino o toilette. Non usare mai il dispositivo se è danneggiato. Non usarlo in modo diverso da quello descritto nel Manuale dell'Utente.
8. Questa Guida d'avvio rapido non è intesa per fornirvi tutte le informazioni necessarie per l'uso dello strumento o per un'applicazione. Vi invitiamo a leggere il Manuale dell'Utente, contenuto sul CD-ROM fornito a corredo, prima di usare lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa o i prodotti acclusi.


Per assicurare uno smaltimento corretto dello strumento ageLOC® Galvanic Body Spa e della pila, si raccomanda di smaltirli conformemente ad eventuali legislazioni o criteri vigenti a livello locale per lo smaltimento di dispositivi elettrici/pile. Non devono essere smaltiti come normali rifiuti domestici.

Diagrammi e legenda di ageLOC® Galvanic Body Spa

Caratteristiche e icone del display dello strumento ageLOC® Galvanic Body Spa

Funzioni dello strumento


- ❶ display
- ❷ pulsante di accensione/ spegnimento
- ❸ piastra cromata di attivazione
- ❹ vano pile (con due pile AAA già installate)
- ❺ superficie conduttiva ageLOC®

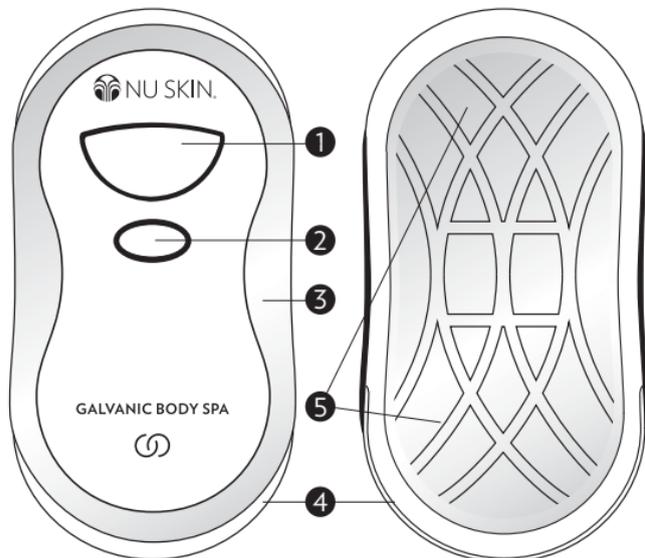

Icone del display

- ❻ indicatore di pila scarica - quest'icona si illumina quando le pile sono scariche;
- ❼ anelli ageLOC® - quest'icona appare quando l'unità è accesa;
- ❽ l'orologio e il numero 5 - queste icone appaiono a indicare la durata dell'applicazione, ovvero 5 minuti.

Nota: prima dell'uso togliere la plastica protettiva dallo strumento.

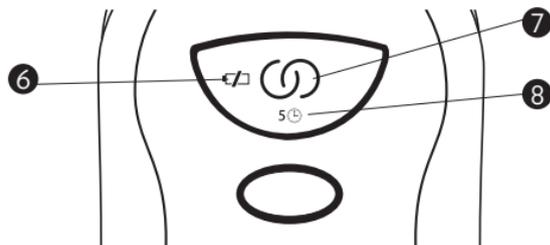

Istruzioni passo per passo

Come usare lo strumento ageLOC® Galvanic Body Spa

1. Applicare ageLOC® Body Shaping Gel

- a. Applicare una quantità abbondante di gel sull'area selezionata. Applicare solo sulla parte selezionata.
- b. Premere il pulsante di accensione/spegnimento una volta sola. Gli anelli ageLOC® appariranno al centro del display. Anche la durata dell'applicazione di 5 minuti appare sotto gli anelli ageLOC®.

2. Eseguire l'applicazione

Per prima cosa, inumidire accuratamente le dita e il palmo della mano con acqua o con NaPCA Moisture Mist. Tenere lo strumento con una mano ben inumidita, assicurandosi che le dita tocchino gli attivatori cromati. Con la superficie conduttiva toccare la pelle dove è stato applicato ageLOC® Body Shaping Gel. Quando il dispositivo regola automaticamente il livello di corrente in base al tipo di pelle, si odono 1, 2 o 3 segnali acustici. Iniziare a massaggiare lentamente con un movimento circolare l'area su cui è stato applicato il prodotto, muovendolo avanti e indietro lungo la coscia, il braccio o attraverso l'area degli addominali inferiori.

Lo strumento emette un segnale acustico ogni 10 secondi, a indicare che l'unità è accesa e funziona correttamente.

Quando rimangono 30 secondi alla fine dell'applicazione, si ode un segnale acustico ogni 5 secondi fino a quando l'applicazione è finita.

Ricordatevi di tenere sempre lo strumento a contatto con la pelle. Se si solleva lo strumento, si interrompe la corrente galvanica e, quindi, l'applicazione. In tal caso, la luce della retroilluminazione inizia a lampeggiare e lo strumento smette di emettere segnali acustici fino a che il circuito non viene ripristinato.

1. Per completare un'applicazione:

alla fine dell'applicazione, lo strumento emette un lungo segnale acustico seguito da due segnali brevi, ad indicare che l'applicazione è completa. L'orologio e il tempo di applicazione scompaiono. Togliere il prodotto in eccesso dalla pelle. Togliere il prodotto rimasto dallo strumento e dalla superficie conduttrice con un asciugamano bagnato e asciugare accuratamente. Non usare detergenti chimici o solventi aggressivi che possono danneggiare il prodotto. Conservare in un luogo asciutto.

- 1. Per un risultato migliore,** usare ageLOC® Dermatic Effects® ogni giorno, mattina e sera. Leggere completamente le istruzioni di ageLOC® Dermatic Effects® prima dell'uso.

Per istruzioni più dettagliate, vi invitiamo a fare riferimento al Manuale dell'Utente, contenuto sul CD-ROM fornito a corredo con il ageLOC® Galvanic Body Spa o disponibile nella libreria di Office.. Seguire sempre le istruzioni.